

LINEA Test

test de grossesse

Test d'autodiagnostic in vitro

Quand vous êtes enceinte :

Lorsqu'une femme est enceinte, son corps produit une hormone appelée hormone gonadotrope chorionique HCG. La sécrétion de cette hormone par le placenta qui se développe commence peu de temps après la conception, et augmente rapidement durant le premier trimestre.

Le test LINEA Test est rapide, c'est un test qualitatif qui détecte la présence de l'HCG dans l'urine. Avec ce test de haute sensibilité (25UI/L), la grossesse peut être détectée dès la première semaine de retard.

Si le résultat est positif vous êtes enceinte, consultez votre médecin afin de discuter de votre grossesse, et de son suivi jusqu'à la naissance. Un résultat négatif indique l'absence de l'hormone HCG dans l'urine, ce qui signifie qu'apparemment vous n'êtes pas enceinte. Par contre, si vos règles ne démarrent pas dans les 7 jours qui suivent la date présumée, il se peut que vous ayez commis une légère erreur dans le calcul du début du cycle habituel. Si vous avez un cycle irrégulier, il est d'autant plus difficile de déterminer si vous avez du retard ou non. Refaire un test, et si ce dernier est toujours négatif, et que vous n'avez toujours pas eu vos règles, vous devez consulter un médecin.

Comment fonctionne le LINEA Test :

Le test LINEA Test contient tout ce qui est nécessaire afin de savoir si vous êtes enceinte ou non.

Avant de commencer :

1. Lire attentivement les instructions avant de pratiquer le test. Ne l'ouvrez pas tant que vous n'êtes pas prête.
2. Utiliser une montre, un pendule ou un autre moyen de calculer le temps, mais quelque chose de fiable.
3. Si vous avez des questions sur les instructions ou sur les résultats du test, appelez le : N° Vert : 0800 718 054

Comment réaliser le test :


1. Sortir le test de son enveloppe en la déchirant sur le côté.
2. Enlever le capuchon qui protège la tige absorbante (selon fig.1)



3. Pour effectuer le test, l'orienter de façon à diriger la tige absorbante vers le bas (fig.2)



4. Placer la tige absorbante sous le jet d'urine pendant au moins six secondes, en le tenant par l'autre extrémité (fig. 3).

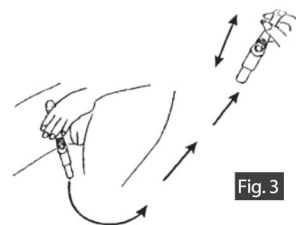

Faire attention de ne pas le positionner à l'envers (fig. 4).




5. Retirer le test du jet d'urine, et replacer le capuchon protecteur sur la partie mouillée.

6. Continuer à maintenir le test à la verticale, vers le bas, ou placez-le sur une surface plane en faisant attention de ne pas le mettre à l'envers (la fenêtre de lecture doit être visible).

Lecture des résultats :

Nous vous conseillons de regarder le test entre 5 et 10 minutes après l'avoir fait (fig. 5). Cependant, un résultat positif peut être observé en moins d'une minute. Pour être sûr d'un résultat négatif, il faut attendre les 10 minutes.

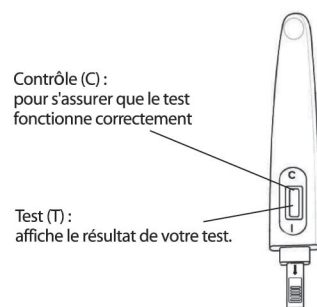

Interprétation des résultats :


Après avoir effectué correctement le test, que vous soyez enceinte ou non, une bande de couleur apparaît dans la partie contrôle (C) de la fenêtre de résultat, cela indique que le test a bien fonctionné, et que vous pouvez lire le résultat.

POSITIF : Si, après avoir correctement réalisé le test et attendu 5 à 10 minutes, une bande de couleur apparaît dans la partie résultat (T), vous pouvez en conclure que vous êtes enceinte.

N.B. : même si la bande de couleur est très claire dans la partie résultat (T) au bout de 5 minutes, le résultat est positif.

NÉGATIF : si aucune bande n'apparaît dans la partie résultat (T), après 5 minutes, vous pouvez en conclure que vous n'êtes pas enceinte.

Attention : si aucune bande de couleur n'apparaît dans la partie contrôle (C), il se peut que vous n'avez pas appliqué le test suffisamment sous l'urine, que vous n'avez pas respecté le mode d'emploi, ou que vous ayez détérioré le test.

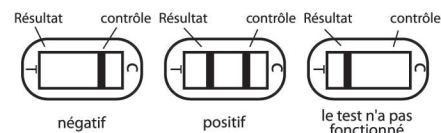

Conservation :

Conserver à température ambiante.
Ne pas utiliser le test lorsque la date de péremption est dépassée.

Précautions d'emploi :

- 1- Prévu pour de l'autodiagnostic in vitro uniquement (pas d'utilisation interne).
- 2- Ne pas réutiliser
- 3- Le résultat n'est fiable que si le test a été effectué conformément aux instructions.
- 4- Ne pas utiliser après la date de péremption notée sur l'emballage.
- 5- En dépit du fait que le LINEA Test est précis et fiable, il n'est pas impossible qu'une erreur de diagnostic se produise. Vérifier avec votre médecin en cas de doute. Certains facteurs, tels que l'état de santé dans lequel se trouve la personne effectuant le test peuvent fausser les résultats (ex : grossesse extra-utérine). Effectuer un test après un accouchement peut donner un test positif alors que la personne n'est pas enceinte.
- 6- Tenir hors de portée des enfants.

Quelques questions que vous vous posez :

Pendant combien de temps le résultat reste-t-il apparent ?
Un résultat positif reste inchangé. Mais il se peut que le fond de la fenêtre de résultat fonce un peu. Par contre, dans le cas d'un test négatif, un léger trait peut apparaître après 10 minutes, ce n'est pas un résultat positif, c'est pourquoi il ne faut pas interpréter le résultat après 10 minutes.

Qu'est-ce qui fait apparaître la ligne ?

Les bandelettes test placées dans le LINEA Test sont enduites de protéines qui détectent l'hormone HCG présente dans l'urine. Si l'hormone HCG est présente dans l'urine, la réaction fait apparaître une bande dans la partie test (T) de la fenêtre de résultat. Par contre, dans la partie contrôle (C) de la fenêtre, la bande apparaît avec ou sans présence de l'hormone HCG, il suffit juste que le test ait été effectué dans les bonnes conditions.

De quelle couleur sont les bandes qui apparaissent dans la fenêtre ?

Elles peuvent aller du rose clair au violet foncé, cela dépend de la concentration en hormone de grossesse dans l'urine. La nuance de couleur n'affecte en rien le résultat.

L'usage de médicament peut-il affecter le résultat ?

L'alcool ? La Contraception orale ?
Consommer de l'alcool ne modifie pas le résultat. Il en est de même pour la contraception orale, les antibiotiques, les anti-douleurs.
Seuls les médicaments contenant de l'hormone HCG peuvent influencer sur les résultats.

La quantité de liquide absorbée peut-elle modifier les résultats ?

Il est conseillé d'effectuer le test avec les premières urines du matin après une restriction hydrique de 12h ou sans avoir bu depuis la veille au soir.

Que faire en cas de résultat positif ?

Cela signifie que l'HCG est présente dans les urines, et que vous êtes probablement enceinte. Il faut donc consulter votre médecin afin de discuter de la grossesse avec lui.

Que faire en cas de résultat négatif, mais avec doute ?

Si le résultat est négatif c'est que la présence d'HCG n'a pas été décelée. Vous n'êtes apparemment pas enceinte, ou vous pouvez avoir calculé avec erreur le début du cycle menstruel. Si vous avez un doute, vous pouvez effectuer un nouveau test dès la première semaine de retard. Si vous avez encore un résultat négatif et que vos règles n'arrivent pas, il se peut qu'il y ait d'autres raisons à l'absence de cycle, et vous devez consulter votre médecin.

Notice révisée en février 2008.

CE 0123

Distribué par : Ranbaxy Pharmacie Génériques
11-15 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux.
N° Vert : 0800 718 054

Fabriqué par : Bct Systems Co., Ltd
Représentant Européen : SIH Corp. Hambourg, Germany.